

累計販売 14 万本突破の人気シリーズ「マイドウ」

「絶対にずれない」子ども用眼鏡、初のユニセックスモデル新発売

10月14日はスポーツの日！耳に巻き付く特殊フレームで、勉強・スポーツに集中！！

眼鏡専門店を運営する(株)ビジョンメガネ(大阪市)は、耳にぐるっと巻き付く独自のフレーム形状で、「絶対にずれない」がコンセプトの子ども用眼鏡「マイドウ ジュニア(MYDO Jr)」の新商品を、2024年10月11日(金)から新発売します。価格は税込 20,800 円(薄型レンズ代込み)で、全国 101 店で販売します。

新商品は、10歳から14歳の男児・女児向けで、ユニセックス仕様です。「マイドウ」シリーズから、男女兼用商品が登場するのは、今回が初めてです。

耳に巻き付く特殊なフレームで、眼鏡がずり落ちず、勉強や運動に集中できる従来の機能性はそのままだに、男女問わず使いやすいフレームデザインとカラーを採用しています。玉形は「ボストン型」(丸みを帯びた逆三角形の形状)で、カラーは4色展開です。

10月14日は「スポーツの日」です。激しく動いても、汗をかいても“絶対にずれない”本商品で、スポーツを夢中になって楽しんでいただきたい考えです。

【参考動画】「逆上がりでもメガネはずれない!?落ちない!?」：<https://youtube.com/shorts/plJulQjJY9k>



女の子用が欲しい！の声に応えた初の男女兼用仕様、ベーシックな玉形&カラーで登場

「マイドウ」は、累計販売 14 万本を突破する当社の人気シリーズです。以前より多くのお客様からご要望をいただいていた「マイドウの女の子用が欲しい」という声にお応えし、今回、初の男女兼用仕様の商品化を実現しています。

玉型は性別を問わず使いやすい、定番のボストン型です。

色も黒、茶、紺、べっ甲を模した柄のデミの、4種のベーシックカラーを揃えます。透明度が高く、発色が美しい樹脂素材「TR90」をフレームに採用することで、軽やかな見た目に仕上げています。イチオシは、透け感のあるクリアブラウンと、クリアネイビーです。ちょっぴり背伸びしたいおしゃれなお子様ぴったりです。



<マイドゥ ジュニアの特徴について>

勉強中や運動中にずり落ちず、見え方安定

累計 14 万本販売 (2004.8~2024.9) の人気シリーズ「マイドゥ」の最大の特長は、フレームの先セル(耳にかける部分)に、耳の後ろまで巻き付く特殊形状の部品を採用している点です。

眼鏡が一切ずり落ちないので、長時間机に向かう勉強中や、スマホやタブレットの画面を見ている間も、正しいかけ位置を常にキープ。ピントが合った状態を保ちます。

激しく動いても、汗をかいても、耳に吸い付くようにフィット。運動時もストレスなく、しっかりと集中できます。

水洗い可能なのでお手入れも簡単です。



勉強中や遊びに夢中の時も、眼鏡の位置が動かないため、ピントがずれにくく、視力と視界を常に良い状態に。個人差はあるものの、目の疲れの軽減も期待できます。

※画像は既存商品の着用イメージ

成長段階の子どもでもしっかりフィット！面積の広い鼻パッドを採用

子ども用眼鏡としての使いやすさを向上させるため、面積の広い鼻パッドを採用しています。広い面で眼鏡を支えることで、成長段階で鼻が低い子どもでもしっかりフィットし、ずれにくさを実現しています。柔らかいラバー素材を使った鼻パッドなので、鼻への負担を軽減します。

また、フレーム素材に軽さと柔らかさが特徴の樹脂素材「TR90」を採用することで、長時間の着用でもストレスフリーです。




広めの鼻パッドでしっかりフィット！

ー 耳にかかる部分の「5つのこだわり」、哺乳瓶の吸い口の素材で柔らかく圧迫感なし

<1> 上下で開閉式の二重構造で、 耳に“巻き付く”先セル

フレームの耳にかかる部分のパーツである先セルが、長さの異なる上下 2 本の特殊構造になっています。独自開発の先セルは、短い上の部分が通常の眼鏡と同じ形状なのに対して、長い下の部分は開閉式で、かける前は開いた状態です。

眼鏡を耳にかけたところで、先セルを下に軽く押すと、下部が閉じます。上部と“カチッ”と合わさると、下部が耳を包みこむように、巻き付きます。

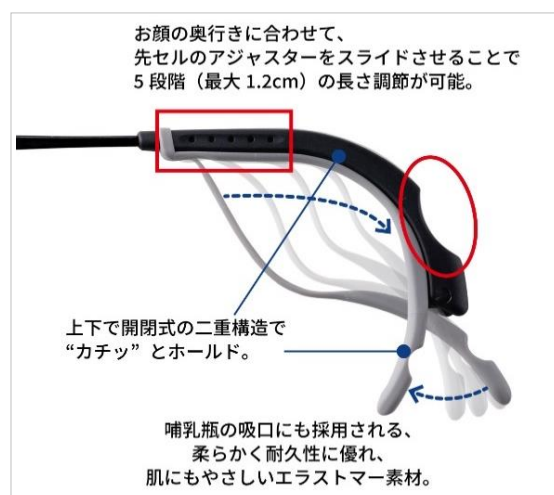

<2> 柔らかく丈夫！哺乳瓶の吸い口の素材

耳にかかる部分は、哺乳瓶の吸い口にも使われるエラストマー素材（樹脂）の中でも、柔らかく丈夫なものを採用。下側の部分は特に柔らかい素材を使用しています。試行錯誤を重ねて、耳に吸いつくようなフィット感を保ちながら、耐久性を上げるとともに、運動中に、長時間かけても痛みや圧迫感のない、かけ心地の良さを実現しています。

<3> 耳に巻き付く力加減を程よくする“半月”の切り込み、痛み軽減

耳にかかる部分に、半月のような切り込み（前ページ写真、赤丸）を入れ、巻き付く力を調整しています。外側に力を逃がすことで、痛みが生じづらい“適度な力加減”になるよう設計しています。

<4> 簡単に長さ調整可能、ツルが 1.2 センチ伸縮、顔の奥行きに合う究極のフィット感

先セルは長さ調整も可能。顔の奥行きに合わせて、かかり具合を調整することができます。“究極のフィット感”を感じていただくためのこだわりです。

ちょうど耳の上にくるあたり（前ページ写真、赤四角囲み）にアジャスターの役割をする小さな穴を設けています。このアジャスターをスライドさせることで、ツルの長さを調整できます。穴は 3 ミリ間隔で、最大 1.2 センチ伸縮します。簡単に調整できるので、スポーツをするときはフィット感を強めるなど、利用シーンに合わせることもできます。

<5> 「カチッ」と鳴る「音」にもこだわり、装着感 UP

“かっこいい音”にもこだわりました。耳にかかる部分のパーツ下側が上側にピタッとハマると、「カチッ」と小気味のいい音が鳴ります。装着感を高める工夫です。

「マイドゥ」着用方法 3 ステップ



- 【1】 フレームの先セル下部分を開いて耳にかける
- 【2】 耳の位置で眼鏡を下へ降ろすと“カチッ”と音がします
- 【3】 フレームの先セル下部分が閉じて耳を包み込むようにホールド

動画「MYDO Jr 着用方法」

<https://youtube.com/shorts/OclA1CMhYF4>

「MYDO Jr (マイドゥ ジュニア)」新型 概要

商品名	MYDO Jr(マイドゥ ジュニア)	発売日	2024年10月11日(金)	
税込価格	20,800円 ※薄型1.60非球面レンズ(歪みの少ない薄型レンズ)付き ※衝撃と紫外線から目を強力にガードする、活発なお子様におすすめのレンズのコーティング「プライマーコート」など、オプションによるレンズのアップグレードはプラス3,500円～			
販売店 全101店	◇「ビジョンメガネ」全店(全国15都府県99店舗) ◇「evevory by(アイボリーバイ)ビジョンメガネ」2店(埼玉県1店舗、愛知県1店舗)			
商品HP	https://www.vision-megane.co.jp/mydo/ ※新型の情報は2024年10月11日(金)13:00公開予定			
商品内容	眼鏡フレーム(レンズ付き) 子ども用			
対象	10歳～14歳の男児・女児			
品番	MDJ2003(全4色:クリアブラウン/ブラウンデミ/クリアネイビー/ブラック)			
商品仕様	サイズ	46□17-128(¥38.5)	重さ	12.5g(レンズ部分除く)
	素材	フロント…TR90、テンプル…TR90 ※サイズは左から「レンズ横幅」「ブリッジ幅」「テンプル(つる)の長さ」「天地幅」(単位はすべてmm)		
お手入れ方法	水洗いOK(流水で眼鏡に付着した汚れを洗い流した後に、眼鏡拭きのような柔らかい布で優しく拭き取ってください)			
問合わせ先	電話番号(代表):06-6556-9450 受付時間:10:00～17:00(土日祝日・年末年始を除く)			

会社概要

所在地	〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-12 イイダ2ビル9階		
代表者	代表取締役社長 安東晃一	従業員数	440人(2024年4月末)
資本金	5,000万円		
事業内容	眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器及びその関連商品を取り扱う小売専門店チェーン		